

DOCUMENTS ANNEXES

Guide de pré-étiquetage PRE-DE-022
Guide d'utilisation IDE Lab PRE-MO-044

CONDITIONS DE TRANSPORT

PRELEVEMENT SANGUIN

Température ambiante = 15°C-25°C

Délai d'acceptation = < 12 heures

Excepté certains paramètres précisés par le logo 

Un sachet = un patient

PRELEVEMENT MICROBIOLOGIQUE

	Prélèvement	Température	Délai Acceptation	Délai Rendu
Urines	Chlamydiae Mycoplasmes Gonocoques	T° ambiante	< 24h	J+3
	ECBU	T° ambiante	< 24h	J+2
	ECBU pot urines par défaut	T° ambiante 2°C-8°C	2h 12h	
Selles	Coproculture Recherche de virus/parasites/bactéries par PCR Recherche de sang	TA 2°C-8°C	2h < 24h	J+1
	Autres prélèvements (crachats ..)	T° ambiante	< 2h	J+3
	Prélèvement sur écouvillon avec milieu de transport Prélèvement sur écouvillon pour recherche de Chlamydia / Gonocoque / Mycoplasme	T° ambiante	< 24h	J+3

DELAI DE RENDU DES RESULTATS

Délai de rendu des résultats à J0 si prélèvement arrivé avant 12 heures au laboratoire.

Excepté pour les résultats de microbiologie et de certains examens.

LABORATOIRE SOUS-TRAITANT


Pour les recommandations des examens spécialisés, consulter : EUROFINs-BIOMNIS

→ <http://www.eurofins-biomnis.com/>

PRE-DE-003 V25 28/11/2023

ORDRE DE PRELEVEMENT

-  Tube Coagulation
-  Tube Sec
-  Tube Héparine
-  Tube EDTA
-  Tube Fluorure

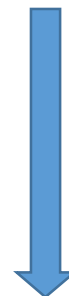

IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT

Coller sur chaque tube l'étiquette correspondante à l'analyse



OBLIGATOIRE POUR GS/RAI

Noter sur le tube : **Nom de naissance**,
Prénom, Nom usuel, Date de naissance

FICHE DE PRELEVEMENT

Compléter la fiche de **renseignements** avec le patient

+

Identité du préleveur (nom et prénom), Date et heure de prélèvement, Renseignements cliniques

Coller l'étiquette « **ORDO 1** » sur l'ordonnance.



Laboratoires de Biologie Médicale

www.laboratoire-opalebio.com

GUIDE DES EXAMENS DE BIOLOGIE MEDICALE



LBM Opalebio

20 rue de Verdun
62630 ETAPLES SUR MER
LBM du Pays de Montreuil

955 rue de Paris
62170 ECUIRES

LBM de l'Hesdinois
1 bis rue d'Abbeville
62140 MARCONNE

LBM de la Baie d'Authie
Clos des Boucaniers
3 avenue du 8 mai 1945
62600 BERCK SUR MER

☎ : 03 21 06 03 43

Ligne de garde IDE joignable 7j/7 de 7h à 20h
(Freddy et Marina)

Mail: IDE@lbmopalebio.fr

Pad Web: <https://opalebio.preleve-a-domicile.fr>



IDE Lab

TUBE HEPARINE

Examen	Recommandations	Délai Acceptation	Délai Rendu	
Acide urique	A jeun 12H	12H	J0	
Albumine		12H	J0	
Amylase		12H	J0	
Bilirubine directe / totale		12H	J0	
β-2 microglobuline		12H	J0	
Calcium	A jeun 12H	12H	J0	
Cholestérol total / HDL	A jeun 12H	12H	J0	
Coefficient de saturation de la transferrine / Fer	A jeun 12H	12H	J0	
Créatinine		12H	J0	
CPK		12H	J0	
CRP		12H	J0	
Ferritine		12H	J0	
GGT		12H	J0	
Haptoglobine		12H	J0	
Iono-gramme	Chlore (Cl)		12H	J0
	Potassium (K)	Préciser si sans garrot	<6H	J0
	Sodium (Na)		12H	J0
LDH		<6H	J0	
Lipase		12H	J0	
Magnésium		12H	J0	
Phosphatases alcalines		12H	J0	
Phosphore	A jeun 12H	<6H	J0	
Préalbumine		12H	J0	
Protides totaux		12H	J0	
Réserve alcaline		12H	J0	
TGO		12H	J0	
TGP		12H	J0	
Triglycérides	A jeun 12H	12H	J0	
Urée		12H	J0	

1
T
U
B
E

URINES (Echantillon ou 24H)

	Examen	Recommandations	Délai Acceptation	Délai Rendu
Calcium	Acide urique Créatinine Glucose Ionogramme (Na/K/Cl)	Protéines Microalbumine Urée	24h	J0

TUBE SEC (avec gel)

Examen	Recommandations	Délai Acceptation	Délai Rendu
CDT		12H	J+2
Electrophorèse des protéines		12H	J+1
Immuno-fixation des protéines		12H	J+3
ACE		12H	J0
AFP		12H	J0
Anti-TG / Anti-TPO		12H	J0
CA 125		12H	J0
CA 15-3		12H	J0
CA 19-9		12H	J0
CMV (IgG/IgM)		12H	J0
Cortisol	Entre 8H et 9H	12H	J0
Cross Laps	A jeun Entre 8H et 9H	12H	J0
Folates B9		12H	J0
FSH	DDR	12H	J0
HCG	DDR	12H	J0
Hépatite B		12H	J0
Hépatite C		12H	J0
HIV		12H	J0
IgE totales		12H	J0
LH	DDR	12H	J0
NT pro-BNP		12H	J0
Œstradiol	DDR	12H	J0
Progestérone	DDR	12H	J0
Prolactine	A jeun 12H Entre 8H et 10H. Après 20 min de repos	12H	J0
PSA libre / total		12H	J0
PTH		<6H	J0
Rubéole - IgG	Grossesse	12H	J0
Syphilis - BW		12H	J0
T3 libre / T4 libre		12H	J0
Toxoplasmose (IgG/IgM)	Grossesse	12H	J0
Troponine	Examen urgent	<6H	J0
TSH	Entre 8H et 12H	12H	J0
Vitamine B12		12H	J0
Vitamine D		12H	J0
Hépatite A IgM		12H	J0
EBV		12H	J0
Procalcitonine (PCT)	Examen urgent	<6H	J0
Sérologie Borréliose (Lyme)		12H	J0

1
T
U
B
E

TUBE CITRATE

A REMPLIR IMPERATIVEMENT JUSQU'AU TRAIT

Examen	Recommandations	Délai Acceptation	Délai Rendu
TP / INR	Médicaments	12H	J0
TCK / TCA	Traitement anti-coagulant	<6H	J0
D-Dimères		12H	J0
Fibrinogène		12H	J0

TUBE EDTA

Examen	Recommandations	Délai Acceptation	Délai Rendu
Numération -Formule sanguine		12H	J0
Plaquettes		24H	J0
Réticulocytes		12H	J0
Vitesse de sédimentation – VS		<8H	J0
Paludisme		12H	J0

Examen	Recommandations	Délai Acceptation	Délai Rendu
Hémoglobine glyquée (HbA1c)		12H	J0

PRENDRE OBLIGATOIREMENT 1 TUBE DEDIE A CES ANALYSES			
Examen	Recommandations	Délai Acceptation	Délai Rendu
Groupe sanguin		12H	J0
RAI		12H	J0

TUBE FLUORURE

Examen	Recommandations	Délai Acceptation	Délai Rendu
Glycémie	A jeun 12H	12H	J0
Glycémie post-prandiale	2H après repas	12H	J0

PRELEVEMENT NASOPHARYNGÉ

	Température	Délai Acceptation	Délai Rendu
SARS-COV-2 (COVID 19) PCR	2°C-8°C	12H	J0

Médicaments = Préciser la posologie, la date et l'heure de la dernière prise, le nom du médicament.

A jeun 12H

Grossesse = Date de début de grossesse